



Mi Electric Toothbrush



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Mi Electric Toothbrush,
Προστατευτικό κάλυμα άξονα τροφοδοσίας, Χρωματιστό
δαχτυλίδι, βάση φόρτισης, κεφαλή οδοντόβουρτσας,
προστατευτικό κεφαλής, ελληνικές οδηγίες χρήσης και όροι
εγγύησης

Σημείωση: Μπορεί να αισθανθείτε κνησμό ή να παρουσιάσετε μικρή αιμορραγία κατά την πρώτη χρήση. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ούλα δεν είναι συνηθισμένα σε αυτό το αποτελεσματικό καθάρισμα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την λειτουργία Αγαπημένο ♥ της οδοντόβουρτσας. Αυτό το σύμπτωμα εξαφανίζεται μέσα σε 1 με 2 εβδομάδες. Αν παραμείνει μετά από 2 εβδομάδες, σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτήν την οδοντόβουρτσα και συμβουλευτείτε έναν οδοντίατρο.

Προειδοποίηση

1. Οι χρήστες που υποβάλλονται σε ορθοδοντική, οδοντιατρική επισκευή ή έχουν οδοντικό εμφύτευμα θα πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν υπό την καθοδήγηση οδοντιάτρων.
2. Η Mi Electric Toothbrush συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας για ηλεκτρομαγνητικές συσκευές. Για οποιαδήποτε αμφιβολία που αφορά βηματοδότες καρδιάς ή άλλες εμφυτευμένες συσκευές, συμβουλευτείτε γιατρούς ή τους κατασκευαστές των εμφυτευμένων συσκευών πριν από κάθε χρήση.
3. Το προϊόν αυτό προορίζεται για τον καθαρισμό δοντιών, ούλων και γλωσσών μόνο. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς. Αν νιώσετε οποιαδήποτε δυσφορία ή πόνο, σταματήστε αμέσως τη χρήση αυτού του προϊόντος και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Απαγορεύσεις

1. Μη βυθίζετε τη βάση φόρτισης στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
2. Μετά τον καθαρισμό, ελέγξτε ότι το φιλτράρισμα της βάσης φόρτισης είναι εντελώς στεγνό και στη συνέχεια συνδέστε το στο τροφοδοτικό.
3. Το προϊόν αυτό περιέχει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μη ρίχνετε το προϊόν σε φωτιά ή μην το φορτίζετε, χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε σε υπερβόλτον με υψηλή θερμοκρασία.
4. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να επιδιορθώσετε το προϊόν.


Σημαντικό

1. Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς φθορές πριν από τη χρήση. Εάν έχει φθορά ή είναι σοβαρά θραυσμένο, μην το χρησιμοποιείτε.
2. Πριν το συνδέσετε με μια τροφοδοσία ρεύματος, ελέγξτε αν η τοπική τροφοδοσία ρεύματος είναι σύμφωνη με την απαιτούμενη τάση που αναγράφεται στο προϊόν.
3. Εάν υπάρχει βλάβη στη βάση φόρτισης, μην τη χρησιμοποιείτε.
4. Εάν αυτό το προϊόν (συμπεριλαμβανομένης της λαβής και της κεφαλής της οδοντόβουρτσας) παρουσιάζει οποιαδήποτε σημάδια θραύσης, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη βάση φόρτισης σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας (έκθεση στον ήλιο).
6. Μη χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα κατά τη διάρκεια μπάνιου ή ντους.

Συμβουλές

1. Μη μοιράζεστε την κεφαλή μιας οδοντόβουρτσας με άλλους.
2. Μην κουνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη βάση φόρτισης όταν είναι συνδεδεμένη σε τροφοδοσία ρεύματος.
3. Μην τοποθετείτε μεταλλικό αντικείμενο στη βάση φόρτισης όταν είναι συνδεδεμένη σε τροφοδοσία ρεύματος.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

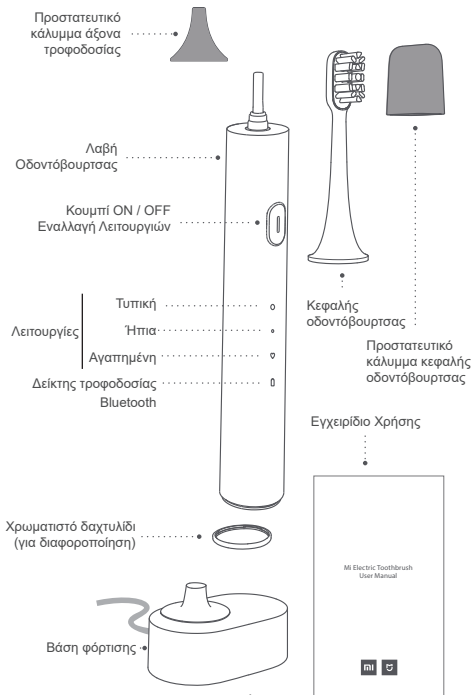


2. ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Συμβουλή: Μπορεί να αισθανθείτε κνησμό ή να παρουσιάσετε μικρή αιμορραγία κατά την πρώτη χρήση. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ούλα δεν είναι συνηθισμένα σε αυτό το αποτελεσματικό καθάρισμα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την λειτουργία Αγαπημένο ♥ της οδοντόβουρτσας. Αυτό το σύμπτωμα εξαφανίζεται γενικά μέσα σε 1 με 2 εβδομάδες. Αν παραμείνει μετά από 2 εβδομάδες, σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτήν την οδοντόβουρτσα και συμβουλευτείτε έναν οδοντίατρο.


α. Εγκατάσταση κεφαλής της οδοντόβουρτσας

Τοποθετήστε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας στη λαβή της και διασφαλίστε ένα συγκεκριμένο κενό μεταξύ των δύο μερών. (Το κενό είναι για τη διασφάλιση ότι η κεφαλή της οδοντόβουρτσας δε θα συγκρούεται με τη λαβή της οδοντόβουρτσας κατά τη διάρκεια των δονήσεων υψηλής συχνότητας, ώστε ο κινητήρας να είναι ισχυρότερος.

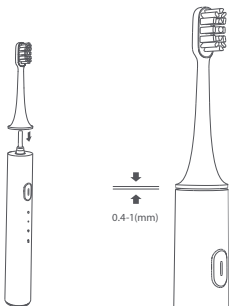


β. Εγκατάσταση και αντικατάσταση ενός χρωματιστού δαχτυλιδιού

- Αντικαταστήστε δαχτυλίδια διαφορετικών χρωμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
- Αφαιρέστε ένα χρωματιστό δαχτυλίδι: Κρατήστε την οδοντόβουρτσα με το αριστερό χέρι, πιέστε προς την πίσω πλευρά (τραχιά επιφάνεια) της οδοντόβουρτσας με τον αριστερό αντίχειρα, πιέστε προς την οπή αέρα στο κάτω μέρος με το δεξί δείκτη, εισάγετε το νύχι του αντίχειρα στο κενό μεταξύ του χρωματιστού δαχτυλιδιού και της λαβής, σπρώξτε λίγο το χρωματιστό δαχτυλίδι προς τα πάνω με δύναμη για να το αφαιρέσετε.
- Εγκατάσταση χρωματιστού δαχτυλιδιού: Κρατήστε τα κλιπ του χρωματιστού δαχτυλιδιού προς τα κάτω και ταιριάξτε τα τρία κλιπ με τις θέσεις των τριών κλιπ στη λαβή, δηλαδή των δύο σχημάτων από την κάτοψη που μοιάζουν με τρίγωνο. Πιέστε το χρωματιστό δαχτυλίδι προς τα κάτω με δύναμη για να το εγκαταστήσετε.

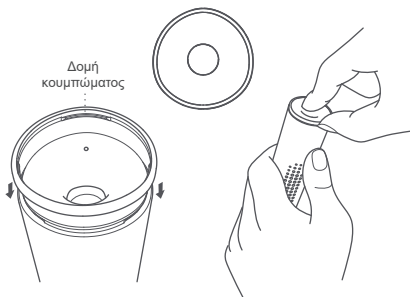

γ. Τοποθετήστε οδοντόκρεμα

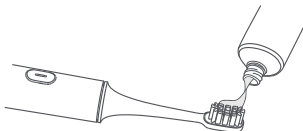

δ. Επιλογή λειτουργίας



- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αλλαγή προγράμματος

- Ενεργοποίηση: πιέστε ελαφρά το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

- Αλλαγή προγράμματος: όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε λειτουργία.


- Παύση: Πατήστε το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο για παύση της συσκευής. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν εκτελείται καμία λειτουργία μετά από 30 δευτερόλεπτα σε κατάσταση παύσης.

- Απενεργοποίηση: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αλλάξτε σε λειτουργία Αγαπημένο και στη συνέχεια αλλάξτε ξανά τη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Σε περίπτωση ειδικών περιστάσεων, πιέστε και κρατήστε το κουμπί για 12 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις (για αποφυγή σφαλμάτων δεδομένων, συγχρονίστε τα δεδομένα στο smartphone μέσω Bluetooth).


ε. Βουρτσίστε τα δόντια υγιεινά

- Μετακινήστε αργά την οδοντόβουρτσα διατηρώντας γωνία 45° μεταξύ των τριχών της οδοντόβουρτσας και των γραμμών των ούλων.
- Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος για ελεύθερη εναλλαγή της λειτουργίας βουρτσίσματος.
- Κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος, η οδοντόβουρτσα σταματάει τη δόνηση κάθε 30 δευτερόλεπτα για να σας υποδείξει να αλλάξετε θέση βουρτσίσματος.
- Αν η οδοντόβουρτσα δε σταματήσει ενεργά, απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη λήξη της λειτουργίας βουρτσίσματος (η λειτουργία βουρτσίσματος μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή).

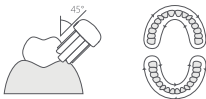

ζ. Καθαρισμός της κεφαλής της οδοντόβουρτσας

- Μετά το βούρτσισμα, ξεπλύνετε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας με τρεχούμενο νερό.
- Μετά τον καθαρισμό, καλύψτε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας με το προστατευτικό κάλυμμα για να διατηρήσετε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας καθαρή και υγιεινή.

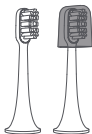

Οι οδοντίατροι συνιστούν την αντικατάσταση της κεφαλής της οδοντόβουρτσας κάθε τρεις μήνες.

η. ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ.

- Μετά την ηλεκτροδότηση της βάσης φόρτισης, ο δείκτης τροφοδοσίας της οδοντόβουρτσας παρουσιάζει διαφορετικά αποτελέσματα:

100%: σταθερό μπλε-πράσινο


100% - 60%: αναβοσβήνει μπλε-πράσινο

60% - 20%: αναβοσβήνει πορτοκαλί

<20%: αναβοσβήνει κόκκινο

- Απαιτούνται περισσότερες από 12 ώρες για την πλήρη φόρτιση της συσκευής όταν η μπαταρία είναι χαμηλή (η ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα).

- Εάν η σύνδεση Bluetooth είναι επιτυχής κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη τροφοδοσίας / Bluetooth αναβοσβήνει τρεις φορές και διατηρείται η σύνδεση Bluetooth. Αφού αφαιρεθεί η σύνδεση Bluetooth, αποκαθίσταται η ένδειξη φόρτισης.

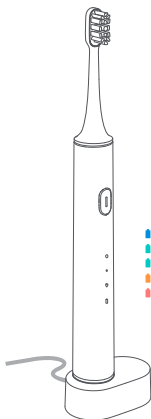

- Bluetooth συνδεδεμένο
- 100%: σταθερό μπλε-πράσινο
- 60% - 20%: αναβοσβήνει πορτοκαλί
- 100% - 60%: αναβοσβήνει μπλε-πράσινο
- <20%: αναβοσβήνει κόκκινο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MI HOME APP

α. Γρήγορη εγκατάσταση

Ελέγξτε τη συσκευή σας και αλληλοεπιδράστε με άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές μέσα από την εφαρμογή Mi Home App.

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Mi Home App.

Σαρώστε τον κώδικα QR ή επισκεφτείτε το Play Store ή το App Store για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Mi Home App.



β. Σύνδεση συσκευής

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο smart phone σας. Μετακινήστε την οδοντόβουρτσα κοντά στο smartphone.

2. Ακολουθήστε τα βήματα στο Mi Home App για τη σύνδεση της συσκευής. Προσθέστε μια συσκευή στο «Οι συσκευές μου».

3. Επιλέξτε μια συσκευή. Πατήστε «Ανίχνευση συσκευής». Επιλέξτε «Mi Electric Toothbrush».

4. Πατήστε τα κουμπιά σύμφωνα με τις υποδείξεις και πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της οδοντόβουρτσας για 3 δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση της σύνδεσης.

* Η οδοντόβουρτσα δε μπορεί να ξεκινήσει όταν είναι συνδεδεμένη με smartphone μέσω Bluetooth.

Δεν μπορεί να γίνει σύνδεση Bluetooth όταν η οδοντόβουρτσα είναι σε λειτουργία.



γ. Συγχρονισμός δεδομένων

Κατεβάστε την εφαρμογή Mi Home App, καταχωρήστε ένα λογαριασμό Mi και συνδεθείτε με αυτόν το λογαριασμό. Αποκτήστε πρόσβαση στο «Οι συσκευές μου» και επιλέξτε τη συσκευή στη λίστα των συσκευών.



Μετακινήστε την οδοντόβουρτσα κοντά στο smartphone



Σύρετε προς τα κάτω στη σελίδα για συγχρονισμό δεδομένων



Ο συγχρονισμός δεδομένων ολοκληρώθηκε

δ. Ανασκόπηση δεδομένων και ρύθμιση λειτουργιών

- Αλλάξτε σε λειτουργία Αγαπημένο ♥.
- Εμφάνιση των δεδομένων βουρτσίσματος και αναφορών ανάλυσης.
- Δείτε τις υπόλοιπες ημέρες χρήσης της κεφαλής της οδοντόβουρτσας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου στο εσωτερικό του προϊόντος ενδέχεται να περιέχουν ρυπογόνες ουσίες. Πριν την απόρριψη του προϊόντος ή την αποστολή για ανακύκλωση, φροντίστε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις στείλετε προς ανακύκλωση. Αν δε μπορέσετε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Mi. Το προσωπικό του κέντρου εξυπηρέτησης θα αφαιρέσει τις μπαταρίες και θα τις απορρίψει με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λαβή φόρτισης

Όνομα: Mi Electric Toothbrush

Μοντέλο: DDYS01SKS

Ονομαστική τάση: 3.7 V

Ονομαστική ισχύς: 2 W

Χρόνος φόρτισης: πάνω από 12 ώρες

Κατηγορία αδιαβροχοποίησης: IPX7

Κατασκευασμένο στην Κίνα

Βάση φόρτισης

Τρόπος φόρτισης: επαγωγική φόρτιση

Τύπος: βάση φόρτισης κλειστού τύπου

Κατηγορία αδιαβροχοποίησης: IPX7

Είσοδος: 5 V 0,5 A

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλμα	Πιθανή αιτία
Η συσκευή δε μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Η συσκευή φορτίζεται. Η συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth. Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Η οδοντόβουρτσα δε μπορεί να εγκατασταθεί στον άξονα τροφοδοσίας.	Η οπή της οδοντόβουρτσας έχει ξένα αντικείμενα. Οδοντόκρεμα ή άλλες ουσίες είναι κολλημένες στον άξονα τροφοδοσίας. Η οδοντόβουρτσα δεν είναι η αυθεντική Mi Electric Toothbrush.
Η κατανάλωση ενέργειας είναι γρήγορη και η συσκευή πρέπει να φορτίζεται συχνά.	Η συσκευή βρίσκεται σε συνδεδεμένη κατάσταση μέσω Bluetooth για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συσκευή χρησιμοποιείται συχνά.
Η δόνηση της κεφαλής της οδοντόβουρτσας είναι ασθενής.	Η κεφαλή της οδοντόβουρτσας δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Υπάρχουν ξένα αντικείμενα μεταξύ της κεφαλής της οδοντόβουρτσας και της λαβής της.
Η εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με την οδοντόβουρτσα.	Το Bluetooth της συσκευής είναι απενεργοποιημένο. Η οδοντόβουρτσα δε βρίσκεται κοντά στη συσκευή. Η οδοντόβουρτσα βρίσκεται σε λειτουργία δόνησης.

Λίστα αστοχιών απόδοσης προϊόντος

Αστοχίες απόδοσης	
Mi Electric Toothbrush	1. Η συσκευή δε μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί κανονικά.
	2. Η δόνηση της κεφαλής της οδοντόβουρτσας είναι μη ομαλή.
	3. Η συσκευή δε μπορεί να συνδεθεί μέσω Bluetooth.
	4. Η φόρτιση είναι μη ομαλή.
	5. Ο δείκτης είναι απενεργοποιημένος.

Πεδίο μη εφαρμογής εγγύησης

1. Σε περίπτωση που το προϊόν επισκευαστεί χωρίς εξουσιοδότηση, κακομεταχειρίζεται, φθείρεται, παραμελείται, εισέρχεται υγρό στο προϊόν, το προϊόν υφίσταται ατύχημα ή τροποποιείται, τα αξεσουάρ του προϊόντος χρησιμοποιούνται εσφαλμένα ή τα σήματα και οι ετικέτες γνησιότητας είναι κατεστραμμένα ή αλλοιωμένα.
2. Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά λόγω ανωτέρας βίας.
3. Η αστοχία του προϊόντος δεν περιλαμβάνεται στη «Λίστα αστοχιών απόδοσης προϊόντος».
4. Το προϊόν και τα εξαρτήματά του εμφανίζουν αστοχίες απόδοσης που αναφέρονται στην «Λίστα αστοχιών απόδοσης προϊόντος» εξαιτίας λάθους χειρισμού.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η Mi Electric Toothbrush που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συ-

σκευής (Serial No).

2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.

3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.

4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.

5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.

6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κ.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαιρισμό.

2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.

3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.

4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.

5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.

6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης
Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2018.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr

 @XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr